




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

S U O D A T T I M E T  
S U O M I ( F I )

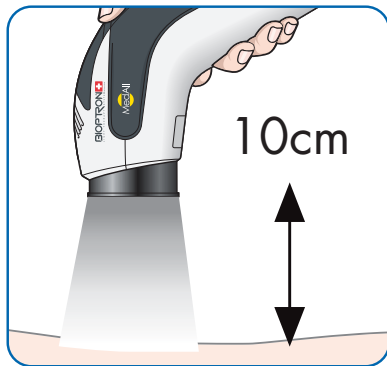

1



2



3



4

## KÄYTTÖ

Aseta BIOPTRON-laite 10 cm:n etäisyydelle haluttu suodatin asennettuna niin, että se kattaa halutun hoitoalueen (kuva 1). Kun käsitellään värisuodattimen halkaisijaa suurempia alueita, käsittele alueet yksi kerrallaan suositeltua hoitoaikaa noudattaen.

## SUODATTIMEN VAIHTO

Irrota vaihdettava suodatin (kuva 2) varovasti ilman liiallista voimaa ja aseta haluttu värisuodatin kuvan 3 esittämällä tavalla. Tartu suodattimeen mieluummin ulkorenkasta kuin linssistä.

## SUODATTIMEN PUHDISTUS (Kuva 4)

1. Irrota suodatin laitteesta tarttumalla suodattimen ulkorenkaiseen.
2. Puhdista pehmeällä ja nukkaamattomalla märällä liinalla, jotta lasin pinta ei naarmuunnu.
3. Kuivaa suodatin toisella nukkaamattomalla liinalla.

## TAKUU:

- Viisi vuotta, jos laitetta on käytetty tarkoituksen mukaisesti ja jos varoituksia on noudatettu.
- Tämä takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- Tämä takuu ei kata esteettisiä muutoksia, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, mikä ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn, tai tuotteen väärinkäytöstä johtuvia vaurioita.

## VAROITUKSET

1. Älä käytä kemikaaleja (kuten isopropanolia) lasipinnan sisä- tai ulkopuolen ja suodatinrenkaan puhdistamiseen.
2. Säilytä suodatin suojapussissa, jotta siihen ei kerry pölyä ja jotta siihen ei tule värivirheitä auringolle altistumisen vuoksi.
3. Suodatin on valmistettu särkyvästä lasista, joten käsittele sitä varoen!
4. Käyttäjä ei saa irrottaa suodattimen linssiä.



PMD-ME145-22-FI  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

S U O M I ( F I )