




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepher Group

СҮЗГІЛЕР

ҚАЗАҚША (KZ)

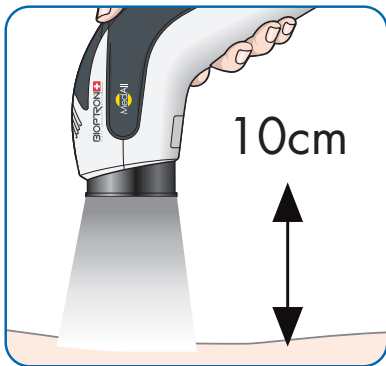

1



2



3



4

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Таңдалған сүзгісі бар BIOPTRON құрылғысын әсер ететін аумақтан 10см қашықтықта орналастырыңыз (1-сурет). Түсті сүзгінің диаметрінен үлкен аумақтарды емдегенде, оларды ұсынылған уақытқа сәйкес кезекпен емдеу керек.

СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ ӘДІСІ

Ауыстырылатын сүзгіні (2-сурет) абайлап және күш түсірмей шығарып алыңыз және 3-суретте көрсетілгендей қалаған түсті сүзгіні салыңыз. Сүзгіні ауыстырған кезде линзаны емес, сыртқы сүзгі сақинасын ұстау керек.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ ӘДІСІ (4-сурет)

1. Сүзгінің сыртқы сақинасын ұстап тұрып, сүзгіні құрылғыдан алыңыз.
2. Шыны бетін сызып алмас үшін жұмсақ, дымқыл, талшықсыз матаны пайдаланыңыз.
3. Сүзгіні басқа талшықсыз матамен сүртіңіз.

КЕПІЛДІК

- Құрылғы мақсаты бойынша пайдаланылып, сақтық шаралары сақталынған жағдайда 5 жылға дейін кепілдік беріледі.
- Бұл кепілдік материалдық ақауларға және зауыттық ақауларға қолданылады
- Бұл кепілдік өнімнің сипаттамаларына әсер етпейтін табиғи тозу салдарынан болатын косметикалық ақауларға немесе оны дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақымдарға қолданылмайды.

ЕСКЕРТУ

1. Шыны бетінің ішкі немесе сыртқы жағын және сүзгі сақинасын тазарту үшін химиялық заттарды (мысалы, изопропил спирті) пайдалануға тыйым салынады.
2. Шаңның жиналуын және күн сәулесінің әсерінен түстің өзгеруін болдырмас үшін сүзгіні қорғаныс қапта сақтау керек.
3. Сүзгіні абайлап ұстау керек, өйткені ол сынғыш әйнектен жасалған!
4. Тұтынушыға сүзгі линзаларын алуға тыйым салынады.



PMD-ME145-22-KZ
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

Қ А З А Қ Ш А (К З)