




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTREN

SVENSKA (SV)

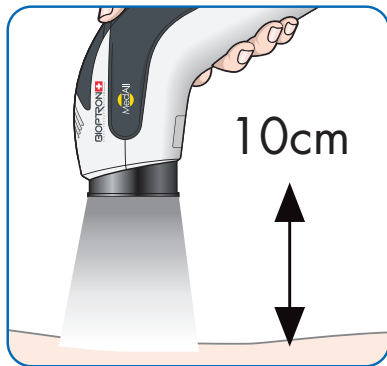

1



2



3



4

## ANVÄND SÅ HÄR

Placera BIOPTRON-enheten med önskat filter på ett avstånd av 10 cm, med önskat filter isatt, så att den täcker det område du vill behandla (bild 1). Vid behandling av områden som är större än diametern på färgfiltret, behandla dem en efter en enligt rekommenderad tid.

## HUR BYTER JAG FILTER?

Ta mjukt och försiktigt ut filtret (bild 2) som ska bytas ut och sätt in önskat färgfilter enligt bild 3. Håll i filtrets yttre ring i stället för i linsen.

## HUR RENGÖR JAG FILTRET? (Bild 4)

1. Ta bort filtret från enheten genom att hålla i filtrets yttre ring.
2. Använd en mjuk, våt, luddfri trasa för att undvika repor på glasytan.
3. Torka filtret med en ny luddfri trasa.

## GARANTI:

- 5 år om produkten används som avsett och om alla varningar respekteras
- Denna garanti täcker materialfel och tillverkningsfel
- Denna garanti täcker inte estetiska förändringar till följd av normalt slitage som inte påverkar produktens prestanda eller skador som orsakas av felaktig användning/hantering av produkten.

## VARNING

1. Använd inte kemikalier (t.ex. isopropylalkohol) för att rengöra insidan eller utsidan på glasytan eller filterringen.
2. Förvara filtret i en skyddspåse för att förhindra ansamling av damm och missfärgning orsakad av exponering för solljus.
3. Filtret är tillverkat av ömtåligt glas, det måste hanteras varsamt!
4. Användaren får inte ta bort filterlinsen.



PMD-ME145-22-SV  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

SVENSKA (SV)